



# Cleanic™

## Eénstaps Prophypasta

Cleanic™ prophypasta maakt met een éénstaps procedure een effectieve reiniging mogelijk met minimale slijtage van glazuur en dentine door gebruik te maken van de wetenschappelijk bewezen geïntegreerde variëteit in abrasief vermogen van natuurlijke perlietdeeltjes.



### All In One

Universele professionele reinigings- & polijstpasta



### Gepatenteerde perliet technologie

Met geïntegreerde variëteit in abrasief vermogen



### Wetenschappelijk bewezen

Effectief reinigen & polijsten met een lage slijtage van glazuur en dentine



### Tijd besparend

Van reinigen tot polijsten in één stap

# Waar traditionele pasta's tekort komen

Traditionele prophypasta's, meestal op basis van puimsteen, zijn agressief ten opzichte van glazuur, dentine en vullingen en veroorzaken:

- **Verkleuring en vorming van tandsteen (calculus)**
- **Krassen op glazuur en dentine**
- **Onnodige schade aan het harde weefsel**
- **Merkbaar verlies van weefsel na verloop van tijd**

Traditionele prophypasta's vereisen ook twee keer zoveel werk aangezien er ten minste twee verschillende gritpasta's nodig zijn voor een effectief resultaat. Om tijd te besparen wordt daarom vaak het polijsten uit de procedure overgeslagen, met als gevolg dat de ongepolijste oppervlakken na verloop van tijd verkleuren en zich nieuw tandplak ophoopt.

## Wat maakt Cleanic anders?

Cleanic is **een eenstaps reinigende en polijstende prophylactische pasta** op basis van perliet technologie. Dit betekent zacht maar efficiënt reinigen en polijsten, **tijdens één sessie**, met één pasta.

Verkrijgbaar **in 5 smaken**



**Berry Burst**



**Mint**



**Light**



**Green Apple**




**Mint zonder fluoride**



# Geïntegreerde abrasieve variëteit

De vulkanische perlietdeeltjes (natuurlijk silica) passen gedurende uw procedure hun abrasieve vermogen aan zoals weergegeven in onderstaande grafiek.

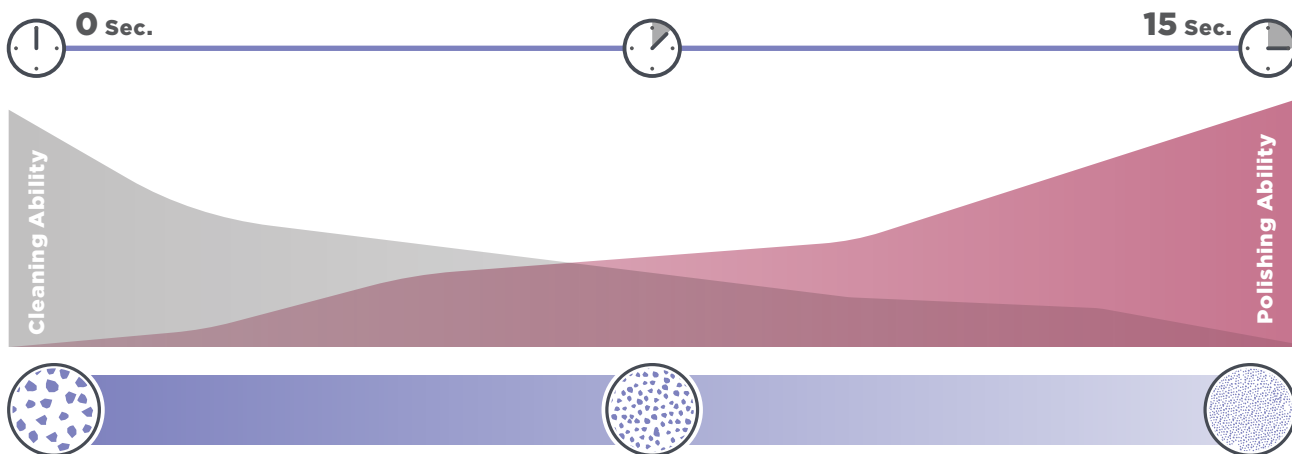

Abrasieve gedrag van de perlietdeeltjes

## Reinigen

Wanneer Cleanic initieel op het tandoppervlak wordt aangebracht, gedraagt het zich als een grove pasta en is het reinigende vermogen van Cleanic maximaal.

## Polijsten

Binnen enkele seconden onder belasting worden de schurende deeltjes gefractioneerd en hun snijkanten afgerond en minder bot.

Op dat moment wordt de pasta effectief voor hoogglanspolijsten.

## Hoe Cleanic te gebruiken

Breng de Cleanic-pasta aan op een beperkt aantal tanden tegelijk (ongeveer 3 tanden) met behulp van een rubberen cup (bijv. Pro-Cups) en gebruik het in één stap van reinigen tot polijsten. Als u klaar bent, brengt u een nieuwe hoeveelheid Cleanic-pasta aan om de volgende groep tanden te behandelen.

### Bij normale elementen:

Werk vanaf het incisale/occlusale oppervlak van elk element, in de richting van de gingiva, dit minimaliseert slijtage van de tand.

### Bij blootgestelde dentine- of worteloppervlakken:

Begin met het aanbrengen van een nieuwe hoeveelheid pasta op het glazuuroppervlak. Beweeg met de gebruikte pasta naar de blootgestelde worteloppervlakken of dentine, waardoor de pasta minder agressief zal zijn.


# Cleanic bestelinformatie

Ref.	Omschrijving	Inhoud	Fluoride	RDA	REA	Smaak	Menthol	Pasta Kleur
3310	Cleanic Cartridge Refill Packs	200g	0.15% CaF	21	3.4	Mint	Y	Light blue
3330	Cleanic Cartridge Refill Packs	100g	0.15% CaF	21	3.4	Mint	Y	Light blue
3210	Cleanic Cartridge Refill Packs - Fluoride free	200g	-	21	3.4	Mint	Y	Light blue
3230	Cleanic Cartridge Refill Packs - Fluoride free	100g	-	21	3.4	Mint	Y	Light blue
3340	Cleanic Single Dose	200x 2g	0.10% NaF	21	3.4	Mint	Y	Dark blue
3380	Cleanic in Tube Mint	100g	0.10% NaF	21	3.4	Mint	Y	Blue
3382	Cleanic in Tube Green Apple	100g	0.10% NaF	21	3.4	Green Apple	N	Green
3183	Cleanic in Tube Mint Fluoride Free	100g	-	21	3.4	Mint	Y	Light blue
3384	Cleanic in Tube Light	100g	0.10% NaF	21	3.4	--	N	Light grey
3386	Cleanic in Tube Berry Burst	100g	0.10% NaF	21	3.4	Red fruits	N	Pink

## Probeer Cleanic met de bijbehorende accessoires

### Pro-Cup en Pro-Cup Junior

Het gelamineerde profiel van deze cups voor eenmalig gebruik houdt de pasta op zijn plaats en voorkomt spetteren tijdens het aanbrengen van de prophypasta. Hetzelfde profiel helpt ook om oververhitting te verminderen. Pro-Cup en Pro-Cup Junior zijn niet gemaakt van natuurlatex.

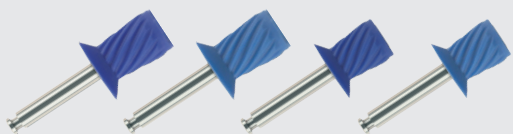

### Kerr's ringpotjes voor prophypasta

De ergonomische ringpotjes voor prophypasta zijn verkrijgbaar voor eenmalig- of meervoudig gebruik.



	Refs & Aantallen				Kleur	Omschrijving	Type		Single Use	
	Ref.	St.	Ref.	St.			Latch	Screw		
<b>Pro-Cup</b>	990/30	30	990/120	120	●	Pro-Cup - Zacht	✓		✓	
	991/30	30	991/120	120	●	Pro-Cup - Hard	✓		✓	
	1810/30	30	1810/120	120	●	Pro-Cup - Zacht		✓	✓	
	1811/30	30	1811/120	120	●	Pro-Cup - Hard		✓	✓	
	<b>Pro-Cup Junior</b>									
	992/30	30	992/120	120	●	Pro-Cup Junior - Zacht	✓		✓	
	993/30	30	993/120	120	●	Pro-Cup Junior - Hard	✓		✓	
	1812/30	30	1812/120	120	●	Pro-Cup Junior - Zacht		✓	✓	
	1813/30	30			●	Pro-Cup Junior - Hard		✓	✓	

#### Ring Pots - Niet autoclaveerbaar

Ref.	Omschrijving
985	Ring Pots - Blauw - Verpakking met 100st.
986	Ring Pots - Assorted Colours - Verpakking met 100st.

#### Prophy Clips - Autoclaveerbaar

Ref.	Omschrijving
3151	Prophy Clips - Verpakking met 6st.

Voor meer informatie, bezoek [kerrdental.com](https://www.kerrdental.com)